


Kawatec Adolf Walker

Inhaber: Adolf Walker-Klement

Medikamente lagern und verteilen
leicht gemacht

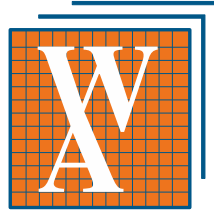

Dahlienstraße 3
77731 Willstätt - Sand
Telefon: 07852 - 93 57 10
Telefax: 07852 - 93 57 12
eMail: Post@kawatec.de



<https://www.Kawatec.de>

<https://www.Kawatec24.de>

WIEGAND
Medication Safety

Blisterbox Duro

Verblisterung ist in der modernen Arzneimitteltherapie nicht mehr wegzudenken. 1997 entwickelte Wiegand für den holländischen Markt den ersten brauchbaren Blisterrollen-Dispenser, den DOSYS. Die einfachen und praktischen Wiegand-Lösungen für verblisterte Tabletten sind sehr beliebt und verbreitet.

Mit der neuen BlisterBox Duro setzt Wiegand einen neuen Maßstab für Bedienbarkeit, Hygiene und Preis. Pflegefachleute schätzen diese neue BlisterBox, die sich nahtlos in das Wiegand-System eingliedert. Das schöne Design spricht Patientinnen und Patienten an.

Eigenschaften BlisterBox Duro:

- Beim Abreißen eines Beutels ist der nächste Beutel bereits sichtbar.
- Auch der Inhalt ist gut sichtbar und lesbar.
- Die transparente Klappe blockiert UV-Strahlen (bis 400nm) und schützt die Tabletten vor einer Beeinträchtigung durch Licht.
- Die Blisterrollen können schnell und einfach eingefüllt werden.
- Schlauchbeutel laufen auch bei großen Tabletten leicht aus der Box.
- Auch Beutel mit kleinen Tabletten rutschen nicht zurück.
- Durch die schöne Verarbeitung ohne Fugen werden Schmutzansammlungen vermieden.
- Die Blisterbox duro ist spülmaschinenfest, kann aber auch von Hand leicht gereinigt werden.
- Kleine Abmessungen und gleichzeitig großer Innenraum: BxTxH: 87x120x127mm
- Passen ins Wiegand-Medikamentenverteilsystem bis hin in die Flexline-Wagen.
- Die gute Stapelbarkeit (liegend und stehend) unterstützt die Lagerung und den Transport bis hin zum Bewohner.



Faltbare Blisterboxen



Wiegand-Blisterboxen sind aus einem robusten und ca. 1 mm starkem PP-Material und sind faltbar. Es gibt sie in transluzent, (Milchglas - Weiß) oder auf Anfrage in (Papier-) Weiß.

Die Blisterboxen wurden mit schweizerischen Qualitätsanforderungen und Know How entwickelt und produziert. Wiegand-Blisterboxen bieten Platz und Hygiene für patientenindividuelle Schlauchblister.

Wiegand - Blisterboxen gibt es als
 Blisterbox Kompakt für 1 Woche mit der Art-Nr. 312T oder 312W
 BxTxH: 78x128x107 mm
 oder für
 Blisterbox large für 2 Wochen mit der Art.-Nr. 311T
 BxTxH: 78x162x139 mm



Auch mit Apotheken-Eindruck



Die Blisterboxen sind maßlich abgestimmt auf Module der ISO-Norm (60x40 cm) und auf Module der Größe 45x40 cm.

In den Modulen haben voneinander getrennte 6 oder 4 Blisterboxen Platz und dahinter haben Sie noch Platz für Sondermedikation und anderes Material.

Die Module und Verteiltablets passen sowohl in die Flexlinewagen der Firma Wiegand, aber auch in die klimatisierten oder nicht klimatisierten Medikamentenschränke von Kawatec.

Blisterhalter, Etikettenhalter und komplette Startersets runden das Programm ab



Blisterhalter
für Schlauchblister



Etikettenhalter Nr. 1515SD
mit Etiketten Nr. 510.13A4



Startersets: stellen Sie sich die Sets selber zusammen



WiBox pro

Medikamente, sicher, mobil

Das Wochenset für zu Hause und unterwegs.
Behalten Sie mit der WiBox pro den Überblick über Ihre
Medikamentenversorgung für die ganze Woche.

In Zusammenarbeit mit dem Spitex-Verband und drei Spitex-Organisationen haben wir ein neues Wochensystem entwickelt, welches speziell auf die Bedürfnisse der Medikamenteneinnahme zu Hause eingeht. Das WiBox pro Wochenset ermöglicht eine schnelle und einfache Handhabung mit guter Sicherheit. Bleiben Sie mobil – mit diesem Wochensystem sind sie auch auf Ihrem Tagesausflug oder auf einer Reise gut unterstützt. Durch das hochwertige Material und die sorgfältige Herstellung werden Sie lange an Ihrer WiBox pro Freude haben.

Einfach, praktisch und schnell

Koffer aufklappen, Deckel aufschieben, Medikamente richten, kontrollieren, Deckel zuschieben – fertig. Egal wer richtet, der Patient, die ambulante Pflege, der Apotheker, die Betreuerin, es geht einfach und schnell.

Übersicht und Sicherheit

Die gute Übersicht erleichtert die Prüfung der gerichteten Medikamente. Jeder der 7 Tagesdispenser ist mit einem Wochentag beschriftet. Die Dispenser können nur in einer Richtung geöffnet werden und geben dadurch die Medikamente automatisch in der richtigen Reihenfolge frei.

Abschließen – Sichern – Transportieren

Die handliche WiBox pro kann mit einem handelsüblichen Schloss abgeschlossen werden. Wenn Sie einen einzelnen Dispenser mitnehmen wollen, sichern Sie den Deckel mit dem grünen Sperrzapfen. Der Deckel verschließt sicher, auch wenn der Dispenser oder die WiBox auf den Boden fällt, die Tabletten bleiben in ihrem Fach.

Der 8. Dispenser

Der 8. Dispenser ist individuell nutzbar. Sie verwenden ihn an dem Tag, an welchem die restlichen Dispenser für die nächsten 7 Tage gerichtet werden oder Sie nutzen ihn für die Reservemedikamente.

Beschriften

Dispenser und Koffer lassen sich mit wasserfesten Markern oder Etiketten beschriften.

Reinigung

Dispenser, Deckel und Koffer können im Haushalt Geschirrspüler mit dem Normalwaschgang bei max. 60° gereinigt und getrocknet werden. Auch unsere Polyester-Etiketten sind Geschirrspüler tauglich.

elibox® – mit wachen Sinnen bis zur Operation



Die Patientenbox für persönliche Hilfsmittel

- Sichere Aufbewahrung von Brille, Hörgeräte und Zahnprothesen eines Patienten während seiner OP.
- Die Hilfsmittel bleiben bis unmittelbar vor der OP beim Patienten und sind danach für den Patienten wieder griffbereit.
- Während der OP bleiben die Hilfsmittel in der elibox® am Patientenbett.

Die elibox® ist das perfekte Aufbewahrungssystem für persönliche Hilfsmittel eines Patienten während einer Operation. Der Patient fühlt sich sicherer und entspannter, da er bis kurz vor der OP sehen und kommunizieren kann.

Produktehinweis

Die blaue Patientenbox besteht aus einem abwaschbaren Behälter [ABS] und zwei Klettverschlüssen [Polyamid] für die Befestigung am Patientenbett. In der Einweg-Blisterschale [APET], welche jeder Patient jeweils neu erhält, können die persönlichen Hilfsmittel in speziellen Aussparungen richtig fixiert werden.

Art. 202.104.001 elibox® Patientenbox

Art. 202.104.010 elibox® Einweg-Blisterschalen